




Сиэс МЕДИКА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрическая звуковая
зубная щетка
**CS Medica
CS-562 Junior**



Благодарим Вас
за приобретение
зубной щетки
CS-562 Junior

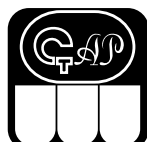

Одобрено
Стоматологической
Ассоциацией России



Внимательно ознакомьтесь
с инструкцией до начала
эксплуатации данного устройства.
Сохраните это руководство
для получения необходимых
сведений в будущем.

Гарантийный талон находится
в настоящем руководстве по эксплуатации.
При покупке требуйте правильного
его заполнения: проставления печати
продавца и даты продажи.

Данная зубная щетка предназначена для
гигиены полости рта.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение:
Указывает на потенциально опасную
ситуацию, развитие которой
может привести к серьезной травме.

- Зубная щетка не является игрушкой и
содержит мелкие детали, которые могут
быть проглочены ребенком. Храните ее в
недоступном для маленьких детей месте.
- Рекомендованный возраст для пользова-
ния данной зубной щеткой – от 5 лет.
- Чистка зубов детей дошкольного возраста
должна всегда проводиться под контролем
взрослых.

- Проконсультируйтесь со своим стоматологом
перед использованием устройства, если к
Вам относится что-либо из нижеследующего:
- чувствительные зубы или десны;
- недавно перенесенная периодонталь-
ная или стоматологическая хирургиче-
ская операция;
- прохождение курса лечения, связанно-
го с проблемами в ротовой полости.

- Прекратите использовать устройство и
проконсультируйтесь со своим стоматоло-
гом, если у Вас наблюдается сильная кро-
воточивость десен после недели пользова-
ния данной зубной щеткой.

- Считается, что абразивные вещества,
содержащиеся в зубной пасте для удаления
пятен от табака или отбеливания
зубов, могут серьезно повредить эмаль в
случае их продолжительного использова-
ния. Проконсультируйтесь со своим стома-
тологом перед тем, как начать употребле-
ние зубных паст с повышенным содержа-
нием абразивных веществ.

- Не разбирайте и не пытайтесь отремонти-
ровать устройство самостоятельно.
- Храните щетку вдали от огня, высоких тем-
ператур и прямых солнечных лучей.

Внимание:
Указывает на потенциально опасную
ситуацию, развитие которой может
привести к незначительной травме, травме
средней тяжести или порче имущества.

- Данное устройство предназначено только
для ухода за полостью рта человека в
домашних условиях.

- Зубная щетка является предметом личной
гигиены и должна использоваться индиви-
дуально.

- Не прижимайте зубную щетку к зубам и
деснам слишком сильно и не касайтесь их
никакими другими пластиковыми деталями
щетки, кроме щетины. Не чистите одну
область в течение продолжительного вре-
мени.

- Не используйте элементы питания, не ука-
занные для данного устройства. Вставляй-
те элемент питания, соблюдая полярность.


- Извлеките элемент питания из зубной
щетки, если Вы не собираетесь пользо-
ваться ею в течение длительного времени
(от трех и более месяцев).

- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно.
Не роняйте ее и не подвергайте сильному
ударному воздействию.

- Нажимайте на кнопку подушкой пальца,
а не ногтем, чтобы не повредить поверх-
ность кнопки.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зубная щетка CS-562 Junior рекомендуется
для чистки зубов детей в возрасте от 5 лет
до 12 лет.

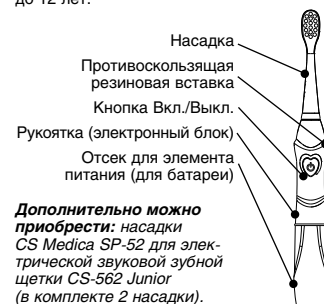


**Дополнительно можно
приобрести:** насадки
CS Medica SP-52 для элек-
трической звуковой зубной
щетки CS-562 Junior
(в комплекте 2 насадки).

3. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Поверните крышку
отсека для элемента
питания против часовой
стрелки и снимите ее.



2. Установите алкали-
новую (щелочную)
батарею типа AAA
таким образом,
чтобы положитель-
ный (+) и отрица-
тельный (-) контак-
ты совпадали с ука-
занной в отсеке для
элемента питания.

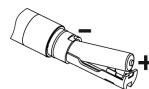

Примечание:

Перед тем как вставлять батарею, насухо
вытрите руки и корпус зубной щетки.

3. Закройте крышку,
повернув ее по часовой
стрелке. Поворачивайте
крышку до тех пор, пока
знаки «точка» и «тире»
не совместятся на
обратной стороне
рукоятки.



Примечание:

Если отсек для элемента питания закрыт
неплотно, в корпус устройства может по-
пасть вода и вызвать нарушения в работе
зубной щетки.

- Срок службы элемента питания зависит от
его модели, времени использования, силы,
прилагаемой во время чистки, и иных фак-
торов. Замените батарею, когда движения
щетки станут более слабыми.


- Время работы от одной алкалиновой
(щелочной) батареи составляет около 150
дней при условии, что щетка используется
2 раза в день по 2 минуты. Так как прила-
гаемая батарея рассчитана для demonstra-
ционных целей, она может проработать
менее 150 дней.

- Рекомендуем использовать алкалиновые
(щелочные) элементы питания типа AAA.

4. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

Установите насадку
на рукоятку, совме-
стив направляющие на
насадке и рукоятке, и
поверните ее по часо-
вой стрелке до упора,
как показано на рисунке
справа.

Для того чтобы снять
насадку, необходимо
проделать те же дей-
ствия в обратном по-
рядке.

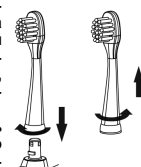

Примечание:

Не прилагайте излишних усилий при уста-
новке насадки.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Смочите щетку водой и выдавите на
нее немного зубной пасты. После этого
введите щетку в ротовую полость.

Примечание:

Чтобы предотвратить разбрызгивание зуб-
ной пасты, включайте и выключайте зубную
щетку только при ее нахождении во рту.

2. Включите питание, нажав на кнопку
Вкл./Выкл.

После однократного нажатия на кнопку
включается подсветка насадки. После сле-
дующего нажатия головка щетки начинает
вибрировать, при этом подсветка остается
включенной, меняя свой цвет на протяжении
всей процедуры чистки зубов.

Красочная подсветка насадки поможет
сделать процедуру чистки зубов простой и
увлекательной для ребенка.


Дополнительные функции:

Автоматическое отключение через 2 минуты
Щетка отключается через 2 минуты. При
необходимости Вы можете продолжить
чистку, снова включив питание щетки.

Промежуточный таймер каждые 30 секунд
Щетка делает на мгновение паузу каждые
30 секунд, что ориентирует Вас на
равномерную очистку всех участков
полости рта.

Аккуратно касайтесь зубов и десен щетин-
ками, медленно перемещая головку щетки
по зубам в горизонтальном направлении,
последовательно проводя чистку всей по-
верхности зубов.

ПРАВИЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ

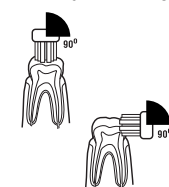


**Поверхность зуба
и окклюзионная
поверхность:**
Во время чистки
держите щетину
под углом 90°
к поверхности зуба.



**Граница между
зубами и десной:**
Во время чистки держите
головку щетки к зубу и очи-
щайте их по очереди, учиты-
вая угол расположения зубов.

**Задняя сторона резцов
или область неровно
расположенных зубов:**
Вертикально прижимайте
головку щетки к зубу и очи-
щайте их по очереди, учиты-
вая угол расположения зубов.

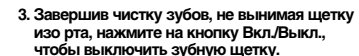

3. Завершив чистку зубов, не вынимая щетку
изо рта, нажмите на кнопку Вкл./Выкл.,
чтобы выключить зубную щетку.

4. Промойте головку щетки под проточ-
ной водой. Аккуратно стряхните изли-
шек воды.

6. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Держите зубную щетку в чистоте.
- Удаляйте загрязнения с корпуса щетки мягкой
сухой тканью. При необходимости смачивайте
ткань в воде или мягком моющем средстве.
Загрязненную поверхность также можно смочить
водой, а затем протереть тканью.
- Несмотря на то, что щетка является водо-
непроницаемой, не погружайте ее в воду
на длительное время.

- Не используйте для очистки летучие органи-
ческие соединения, такие как бензин и
растворитель. Это может испортить нане-
сенную краску или привести к поврежде-
нию устройства.

- После каждого использования промывайте
щетину водой.
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно.
Не роняйте ее и не подвергайте сильному
ударному воздействию.

- Храните щетку в недоступном для детей
месте.
- Храните щетку вдали от огня, высоких тем-
ператур и прямых солнечных лучей.

- Заменяйте насадку для щетки не реже
одного раза в три месяца.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-562 Junior
Модель	0,14 Вт
Потребляемая мощность	1 алкалиновый (щелочной) элемент питания типа AAA
Источник питания	Около 150 дней (при ус- ловии, что щетка исполь- зуется 2 раза в день по 2 мин)
Время работы от одного элемента питания	16 000 движ./мин.
Частота колебаний	0–50°С / 30–85%
Рабочая температура/ относительная влажность	Температура / относительная влажность / атмосферное давление при хранении и транспортировании
Температура / относительная влажность / атмосферное давление при хранении и транспортировании	–20–60°С / 10–95% / 700 гПа – 1060 гПа
Масса	27 г (без элемента питания)
Габаритные размеры	18,9 (диаметр) x 180 (длина) мм
Срок службы	Рукоятка (электронный блок) – 2 года, Насадка – 3 месяца. Элементы пита- ния – устанавливается про- изводителем этих элементов.

Комплект поставки

Рукоятка (электронный
блок) с насадкой, дополни-
тельная насадка, алкалино-
вый элемент питания типа
AAA, руководство по
эксплуатации с гаран-
тийным талоном

IPX7 Степень защиты корпуса зубной
щетки от проникновения твердых
предметов и воды.

EAC Единый знак обращения продукции
на рынке Евразийского экономиче-
ского союза

Температурный диапазон
/Диапазон влажности
/Ограничение атмосферного давления

XX Возможность утилизации использо-
ванной упаковки
YYYY XX – цифровое обозначение матери-
ала упаковки
YYYY – буквенное обозначение
материала упаковки

1 Полиэтилентерфталат

22 Бумага

PET Полиэтилентерфталат

PAP Бумага

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОКАЗАНЫ
КЛИНИЧЕСКИ!**


* Кисельникова Л.П., Зуева Т.Е.,
Карасева Р.В., Огарева А.А.
Сравнительная эффективность
использования различных зубных
щеток в детском возрасте //
Стоматология детского возраста
и профилактика. 2017. Т. XVI.
№1 (60). С. 51-57

8. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства зашифрована в серийном
номере, который находится на упаковке щетки и
имеет структуру YYMMNNNN, где YY обозначает
последние две цифры года производства, M –
номер месяца производства (1–9 соответствуют
месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y –
ноябрь, Z – декабрь), NNNN – порядковый
номер изделия, а также в LOT номере, который
расположен в отсеке для элементов питания и
имеет структуру YYMMNN, где YY обозначает
последние две цифры года производства, M –
номер месяца производства (1–9 соответ-
ствуют месяцам с января по сентябрь, X –
октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNN – номер
партии.

9. МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если зубная щетка перестала работать, возмож-
но, батарейка разрядилась. В случае если даже
после замены батарейки зубная щетка не работа-
ет, не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно.
Обратитесь в ближайший к Вам сервисный
центр (адреса сервисных центров указаны в конце
данного руководства).

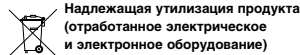

Надлежащая утилизация продукта (отработанное электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании своего срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки. По вопросу утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть батареи для экологически безопасной переработки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сроки гарантии:
Рукоятка (электронный блок) – 2 года
Насадка – 3 месяца

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи «___» _____ г.

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

С условием гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получен.

Подпись покупателя _____

Дата обращения «___» _____ г.

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю «___» _____ г.

Подпись и штамп мастера _____

Работу принял _____
(подпись клиента)

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.PT01.B.01562/20 от 28.02.2020. Срок действия до 27.02.2023. Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Свидетельство о государственной регистрации № RU.01.PA.02.014.E.000968.10.19 от 01.10.2019. Срок действия до 01.10.2024. Соответствует ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.KA01.B.17509/19 от 19.11.2019. Срок действия до 18.11.2024. Соответствует ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.HB11.B.05807/20 от 26.02.2020. Срок действия до 25.02.2025. Соответствует ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Произведено по заказу и под контролем ООО «СиЭс Медика», импортера и уполномоченного представителя производителя, официального представителя торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза

127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 9
Тел.: (495) 363-16-52
Тел./факс: (495) 363-16-56
E-mail: csinfo@csmedica.ru
www.csmedica.ru, csmedica.pf

Центр технического обслуживания в Москве:

ООО «СиЭс Медика ТехЭксперт»
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 14
(м. «Маяковская»)
Тел/факс: (499) 995-11-32
(многочисленный)
E-mail: cstechexpert@mail.ru
www.cstechexpert.ru

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

Производитель:
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
(НИНБО СИГОУ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД)
No.239 Jianghu Road, Zone C
Hongtang Industrial Park,
Jiangbei District, Ningbo, China.
(№ 239 Цзянху Род, Зоун С
Гонтанг Индастриал Парк,
Цзянбэи Дистрикт, Нинбо, Китай)
Сделано в Китае

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ CS MEDICA В РОССИИ

- Арзамас, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05, arz_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202, cs_mediacrm@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЭс Медика Поморье», ул. Северодвинская, д. 63, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЭс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, корп.5 тел.: (8512) 38-20-78, astrahan@csmedica.ru
- Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-barnaul@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Архиперейская, д. 2А, оф. 11, тел.: (4722) 42-12-94, belgorod@csmedica.ru
- Благовещенск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25, csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Мира, д. 41 тел.: (3953) 36-29-28, bratsk@csmedica.ru
- Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Мерещкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЭс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, оф.24, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЭс Медика Вологда», Советский пр-т., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedica@vologda.ru
- Воронеж, ООО «СиЭс Медика Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11, тел.: (473) 232-03-58, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СиЭс Медика Урал», ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, region66@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service66@csmedica.ru
- Иваново, ООО «СиЭс Медика Ярославль», ул. Степанова, д. 5, оф. 105, (4932)26-76-90, 26-76-10, csmedica-ivanovo@mail.ru

- Ижевск, ООО «СиЭс Медика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-74-74, (3952) 43-69-05 office38@csmedica.ru
- Ишкар-Ола, ООО «СиЭс Медика Чекбоксары», пр-т Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@mari-el.ru
- Казань, ООО «СиЭс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskzn@mail.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843)528-01-70, cskzn5@mail.ru
- Калининград, ООО «СиЭс Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49е, оф. 206, тел.: (4012) 95-38-65, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СиЭс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, (903) 636-50-69, csmedica_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СиЭс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, kemerovo@csmedica.ru
- Киров, ООО «СиЭс Медика Вятка», Студенческий пр-т, д. 19, к. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, cs43@mail.ru
- Кострома, ООО «СиЭс Медика Ярославль», пр-т Мира, д. 51, оф.7, тел.: (4942) 63-77-79, (4942) 55-28-73, csmedica-kostroma@mail.ru
- Краснодар, Офис ООО «СиЭс Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, omgop@kubannet.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 238-47-95, service23@csmedica.ru
- Красноярск, ООО «СиЭс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СиЭс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru
- Липецк, ООО «СиЭс Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СиЭс Медика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14, mgnl@csmedica.ru
- Махачкала, ООО «СиЭс Медика Махачкала», ул. Батырая, д. 11, оф. 734, тел.: (8722) 55-85-40, (928) 941-00-20, csmahachkala@mail.ru
- Минеральные Воды, ООО «СиЭс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 106, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedicaakmv@mail.ru
- Мурманск, ООО «СиЭс Медика Карелия» (Петрозаводск), пр-т Кольский, д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 52-53-43, murtmansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СиЭс Медика Казань», пр-т Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижевартовск, ООО «СиЭс Медика Югра», ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, моб.: (982) 145-15-20, nvk@csmedica.ru
- Нижний Новгород, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica-nnov.ru

- Новокузнецк, ООО «СиЭс Медика Кемерово», пр-т Металлургов, д. 48, тел.: (923) 464-05-18 novokuznetsk@csmedica.ru
- Новосибирск, ООО «СиЭс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «СиЭс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, csmedika_omsk@mail.ru
- Орёл, ООО «СиЭс Медика Орел», ул. Московская, д.80, тел.: (4862) 54-24-00, orel@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СиЭс Медика Оренбург», ул. 8 Марта, 21 / ул. Правды, 22, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СиЭс Медика Подмосковье», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Волгодарского, д. 80а, тел.: (499)504-43-28, csposdmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СиЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СиЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 229-78-75, perm@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СиЭс Медика Карелия», ул. Маршала Мерещкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, пом. 1001, тел.: (911) 885-07-56, pskov@csmedica.ru
- Россошь, ООО «СиЭс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossosh@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: 8 (863) 231-03-85, 8 (863) 231-03-86, 8 (863) 231-04-85, 8 (863) 231-04-86, 8 (863) 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СиЭс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru
- Курск, Офис ООО «СиЭс Медика Самара», ул. Советской Армии, д. 180, стр. 1, оф. 306, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, samara@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 105, тел.: (846) 267-38-40, csmedica-samara@sama.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», Малодетскоесельский пр-т, д. 36, тел.: (812) 309-09-80, csnw@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, Малодетскоесельский пр-т, д. 36, лит. Н, тел.: (812) 409-40-30, spbservice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СиЭс Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СиЭс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, saratov@csmedica.ru
- Саров, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), пр-т Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77, arz_cs1@bk.ru, arz_cs@bk.ru
- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», ул. Жильцовоой, д. 4, пом.2, тел.: (978) 137-90-68, (978)137-90-68, director82@csmedica.ru

- Смоленск, ООО «СиЭс Медика Смоленск», ул.2-я Линия Красноармейской Слободы, д. 5, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61-57-65, cs_medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СиЭс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, оф.3 тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicastv@mail.ru
- Сургут, ООО «СиЭс Медика Югра», ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №10, тел.: (3462) 25-46-17, моб.: (912) 817-41-41 surgut@csmedica.ru
- Тамбов, ООО «СиЭс Медика Тамбов», ул. Ореховая, д. 10, пом. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЭс Медика Тверь», пр-т Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, (4822) 65-65-52, tver@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СиЭс Медика Самара», б-р Гая, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, tt@csmedica.ru
- Томск, ООО «СиЭс Медика Томск», ул. Пушкина 18, стр. 1, подъезд №3, 2 этаж, тел.: (3822) 902-703, info_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СиЭс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЭс Медика Тюмень», ул. Амурская, д.4, оф. 6, тел.: (3452) 34-22-70, cstyumen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Свердлова, д.12Г, тел.: (3012) 210-428, 210-378, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.uln@yandex.ru
- Уфа, ООО «СиЭс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, пом.21-24, 30, тел.: 8(347) 200-09-03, 8-800-500-1105, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье», ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/И, оф. 3, тел.: (4212) 70-12-65, csmedica_hab@mail.ru
- Чекбоксары, ООО «СиЭс Медика Чекбоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СиЭс Медика Челябинск», ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica.ru
- Череповец, ООО «СиЭс Медика Вологда», пр-т Луначарского, д. 51, оф. 11, тел.: (8202) 55-52-63, моб.:(921)834-78-65 csmedicaherepovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Ионова, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СиЭс Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 20-12-50, 73-11-82, 90-66-53 cs-yar76@yandex.ru