





Поздравляем!


Уважаемый клиент, Вы приобрели своему ребенку высокотехнологичное устройство, которое позволит детским зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Ваш ребенок непременно оценит и останется доволен!

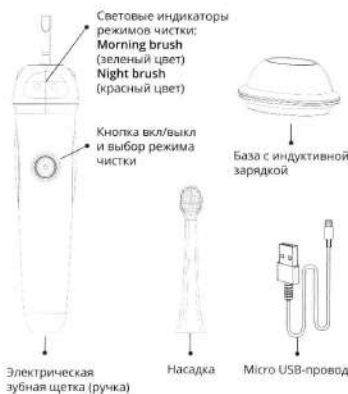

Нанесите чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем Вы приступите к чистке зубов – это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

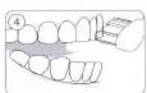

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, совершая вращательно-возвратные движения.

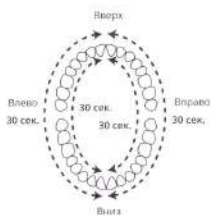


Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре равных условных зоны и очищайте их поочередно. Щетка уведомит Вас о смене зоны чистки коротким прерыванием колебаний щетины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Перед первым применением щетки Reville RL 020 KIDS внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров:

1. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте щетку во время принятия душа.
3. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
5. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
6. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
7. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
8. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
9. Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
10. Перед использованием щетки удалите из полости рта все съемные конструкции.
11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
12. Использование щетки детьми возможно только под присмотром взрослых.
13. Не следует хранить щетку на зарядной базе, по окончании зарядки снимите щетку с зарядной платформы.

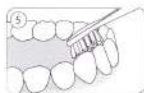

Во время чистки не следует надавливать на чистящую головку слишком энергично.

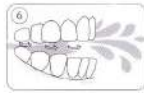

После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой.

УХОД ЗА ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ

Регулярно очищайте зубную щетку Reville RL 020 KIDS. Ополаскивайте ручку и насадку-щетку. При необходимости протрите все поверхности мягкой тканью с мылом.



НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ

В базовой комплектации прибора три стандартные сменные насадки soft-medium. После 3-х месяцев регулярного использования насадки рекомендуется менять из соображений гигиены.



Внимание! Совместное использование одной насадки различными пользователями строго не рекомендуется, согласно правилам личной гигиены.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


Для зарядки аккумулятора необходимо подключить зарядную базу к розетке электропитания и вертикально установить щетку на базу для бесконтактной зарядки. Во время подзарядки аккумулятора происходит мигание индикатора на дисплее корпуса. Прекращение мигания индикатора свидетельствует об окончании зарядки. В результате полной зарядки аккумулятора на дисплее загорается зеленый цвет индикатора. В случае, если щетка долго не использовалась, световой индикатор зарядки загорается не сразу, а по прошествии 6-10 минут.



ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Световые индикаторы режимов чистки:
Morning brush (зеленый цвет)
Night brush (красный цвет)

Кнопка вкл/выкл и Выбор режима чистки

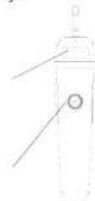

Для включения прибора один раз нажмите кнопку питания. При первом нажатии на кнопку питания происходит включение щетки в режиме Morning brush, при втором нажатии щетка переключается в режим Night brush. Выключение прибора происходит спустя две минуты или при третьем нажатии.

ВЫБОР РЕЖИМА ЧИСТКИ

Morning mode (утренний режим)
18000 колебаний в минуту. Мягкий и комфортный режим. Обеспечит безупречное очищение и эффективный массаж десен после пробуждения.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на прибор 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- На расходные материалы и комплектующие;
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждению; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушением правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации;
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания;
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками;
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей;
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

Night mode (вечерний режим)


22000 колебаний в минуту. Более интенсивный режим. Обеспечит зубам надлежащее очищение, в частности, удалит перед сном остатки пищи и бактериального налета.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ

Установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпала с лицевой стороной корпуса щетки.

Внимание! Между насадкой и корпусом щетки должен присутствовать небольшой зазор.

ПРОЦЕСС ЧИСТКИ

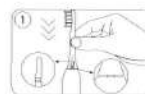

Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и основным корпусом, так как зазор необходим для возможности осуществления вибрации. Включите щетку и убедитесь, что насадка вставлена правильно.



Нанесите немного зубной пасты на чистящую головку щетки. Настоятельно не рекомендуем включать щетку в момент нанесения, дабы предотвратить разбрызгивание зубной пасты.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Основной блок щетки;
- Сменные насадки soft-medium — 3 шт.;
- База с индуктивной зарядкой;
- MicroUSB-провод;
- Наклейки;
- Инструкция по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: RL 020 KIDS.
- Предназначена для эффективной чистки зубов.
- Частота колебаний: 18 000 – 22 000 в мин.
- Материал корпуса: ABS + PC.
- Питание: аккумулятор 800 mAh.
- Время полной зарядки: 8 часов.
- Гарантия: 2 года.
- Хранить при комнатной температуре.